

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : CONTENEDOR DE CONGELACIÓN, INSERTO DE PE Y ALEACIÓN**

**Descripción :** El contenedor de congelación de células, fabricado con espuma de polietileno reticulado y un núcleo de estado sólido proporciona una congelación sin alcohol a una tasa de  $-1^{\circ}\text{C}$  por minuto, ideal para la criopreservación de la mayoría de las células y líneas celulares. Con capacidad para 12 viales criogénicos estándar de 1,0 ml a 2,0 ml, es fácil de usar y ofrece perfiles de congelación consistentes y reproducibles, asegurando alta recuperación y viabilidad celular. Las tapas de los viales quedan expuestas al abrir la tapa, permitiendo una extracción rápida y organizada de las muestras congeladas. El material de espuma de polietileno de alta calidad y el núcleo de aleación garantizan que no se afecte el entorno de congelación ni a otras muestras congeladas cercanas


## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | Ø (mm) | h (mm) | unidades por ref. |
|--------------|--------|--------|-------------------|
| ICEC-012-001 | 116    | 98     | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ICEC-012-001 | 1,716     | 0,21 | 39233010 | 08434868110731 |

## FOTO DEL PRODUCTO

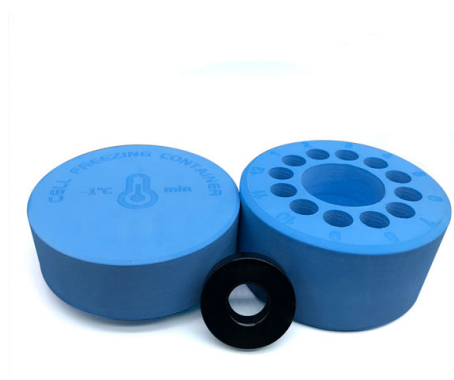

## MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+85 (90)^{\circ}\text{C}$

**GENERAL INFORMATION****Product name : FREEZING CONTAINER, PE INSERT AND ALLOY**


**Description :** The cell freezing container, made with cross-linked polyethylene foam and a solid-state core, provides alcohol-free freezing at a rate of -1 °C per minute, ideal for the cryopreservation of most cells and cell lines. With a capacity for 12 standard cryogenic vials from 1.0 mL to 2.0 mL, it is easy to use and offers consistent and reproducible freezing profiles, ensuring high recovery and cell viability. The vial caps are exposed when the lid is opened, allowing for quick and organized extraction of frozen samples. The high-quality polyethylene foam material and alloy core ensure that the freezing environment or other nearby frozen samples are not affected.

**TECHNICAL DATA**

| reference    | Ø (mm) | h (mm) | pcs/pack |
|--------------|--------|--------|----------|
| ICEC-012-001 | 116    | 98     | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ICEC-012-001 | 1,716     | 0,21 | 39233010 | 08434868110731 |

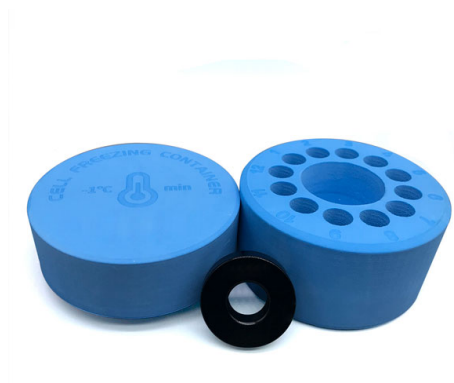**PRODUCT PHOTO****MATERIAL**

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : CONTENEUR DE CONGÉLATION, INSERT EN PE ET ALLIAGE**

**Description :** Le conteneur de congélation de cellules, fabriqué en mousse de polyéthylène réticulé et avec un noyau à l'état solide, offre une congélation sans alcool à un taux de -1 °C par minute, idéal pour la cryoconservation de la plupart des cellules et des lignées cellulaires. Avec une capacité de 12 fioles cryogéniques standard de 1.0 mL à 2.0 mL, il est facile à utiliser et offre des profils de congélation constants et reproductibles, assurant une haute récupération et viabilité cellulaire. Les bouchons des fioles sont exposés lorsque le couvercle est ouvert, permettant une extraction rapide et organisée des échantillons congelés. Le matériau en mousse de polyéthylène de haute qualité et le noyau en alliage garantissent que l'environnement de congélation ou d'autres échantillons congelés à proximité ne soient pas affectés.

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref. |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| ICEC-012-001 | 116    | 98     | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ICEC-012-001 | 1,716     | 0,21 | 39233010 | 08434868110731 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : CONTENITORE DI CONGELAMENTO, INSERTO IN PE E LEGA**

**Descrizione** : Il contenitore di congelamento delle cellule, realizzato con schiuma di polietilene reticolato e un nucleo allo stato solido, fornisce un congelamento senza alcol a una velocità di -1 °C al minuto, ideale per la crioconservazione della maggior parte delle cellule e delle linee cellulari. Con una capacità per 12 fiale criogeniche standard da 1.0 mL a 2.0 mL, è facile da usare e offre profili di congelamento coerenti e riproducibili, garantendo un alto recupero e vitalità cellulare. I tappi delle fiale sono esposti quando il coperchio viene aperto, permettendo un'estrazione rapida e organizzata dei campioni congelati. Il materiale in schiuma di polietilene di alta qualità e il nucleo in lega garantiscono che l'ambiente di congelamento o altri campioni congelati vicini non siano influenzati.


## DATI TECNICI

| referenza    | Ø (mm) | h (mm) | unità per ref. |
|--------------|--------|--------|----------------|
| ICEC-012-001 | 116    | 98     | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ICEC-012-001 | 1,716     | 0,21 | 39233010 | 08434868110731 |

## FOTO DEL PRODOTTO

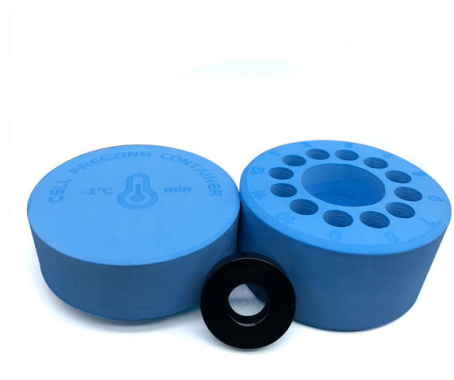

## MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : VRIESCONTAINER, PE-INZETSTUK EN LEGERING**

**Beschrijving** : De celvriescontainer, gemaakt van vernet polyethyleenschuim en een solid-state kern, zorgt voor alcoholvrij invriezen met een snelheid van -1 °C per minuut, ideaal voor de cryopreservatie van de meeste cellen en cellijnen. Met een capaciteit van 12 standaard cryogene vials van 1.0 mL tot 2.0 mL, is het eenvoudig te gebruiken en biedt het consistente en reproduceerbare vriesprofielen, wat zorgt voor een hoge terugwinning en levensvatbaarheid van cellen. De vial-doppen zijn zichtbaar bij het openen van het deksel, waardoor een snelle en georganiseerde extractie van bevroren monsters mogelijk is. Het hoogwaardige polyethyleenschuimmateriaal en de legeringskern zorgen ervoor dat de vriesomgeving of andere nabijgelegen bevroren monsters niet worden beïnvloed

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | Ø (mm) | h (mm) | stuks per ref. |
|--------------|--------|--------|----------------|
| ICEC-012-001 | 116    | 98     | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ICEC-012-001 | 1,716     | 0,21 | 39233010 | 08434868110731 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : EINFRIERBEHÄLTER, PE- UND LEGIERUNGSEINSATZ**

**Beschreibung** : Der Zellgefrierbehälter, hergestellt aus vernetztem Polyethylenschaum und einem Festkern, bietet eine alkoholfreie Gefrierung mit einer Rate von  $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$  pro Minute, ideal für die Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien. Bietet Platz für zwölf Standard-Kryoröhrchen von 1,0 ml bis 2,0 ml, ist einfach zu verwenden und bietet konsistente und reproduzierbare Gefrierprofile, die eine hohe Wiederherstellung und Zellviabilität gewährleisten. Die Röhrchenverschlüsse sind beim Öffnen des Deckels zugänglich, was eine schnelle und organisierte Entnahme der gefrorenen Proben ermöglicht. Das hochwertige Polyethylenschaummaterial und der Legierungskern gewährleisten, dass das Gefrierumfeld und andere nahegelegene gefrorene Proben nicht beeinträchtigt werden.


## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Ø (mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------|--------|-----------------------|
| ICEC-012-001  | 116    | 98     | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| ICEC-012-001 | 1,716                  | 0,21 | 39233010 | 08434868110731 |

## PRODUKTFOTO

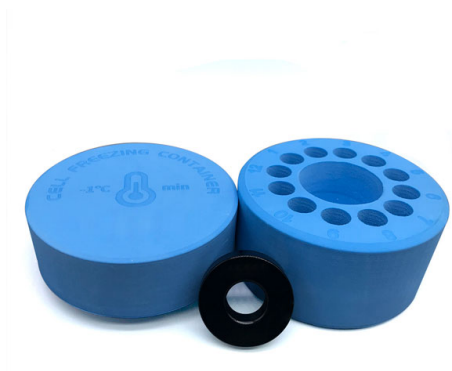

## MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$  (90)  $^{\circ}\text{C}$